

Вибростенд PLSS для работы с пробами большого объема и ситами диаметром до 450мм

Характеристики:

- Съёмный пульт управления для удобной работы
- Зажимное устройство обеспечивает постоянную фиксацию без чрезмерной затяжки
- Низкий уровень шума
- Вмещает сита диаметром от 350мм до 450мм
- Оптimalен для работы с ситами большого диаметра
- Оснащен противовибрационным основанием
- Таймер позволяет установить время работы вибростенда в диапазоне от 5 до 60 минут
- Уникальный режим замедления в конце рабочего цикла
- Два герметизированных электродвигателя, не требующих технического обслуживания
- Блокировка для обеспечения безопасности во время установки сит



Вибростенд PLSS - Описание


PLSS – мощный вибростенд, предназначенный для работы с ситами больших диаметров (до 450мм/18").

Дизайн вибростенда решает проблемы, характерные при работе с более легкими вибростендами и связанные с отрицательным влиянием веса сит и объемных проб на рабочие характеристики вибростенда и повторяемость результатов.

Средства управления вибростенда PLSS



Возможности вибростенда PLSS

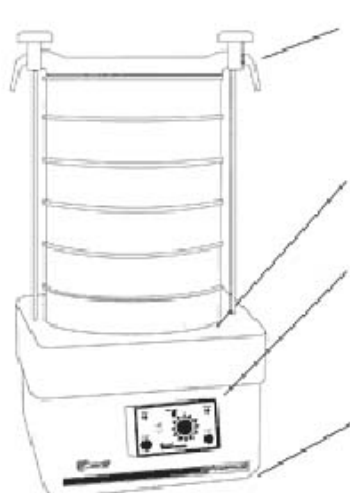

ЗАЖИМНОЕ УСТРОЙСТВО
Обеспечивает возможность быстрой установки и снятия сит, а также соответствующее давление фиксации, избегая чрезмерную затяжку

ОПОРНАЯ ПЛИТА
для размещения сит различного диаметра

СЪЕМНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
Удлинение кабеля позволяет оператору удаляться с блоком управления на расстояние до 3м

ПРОТИВОВИБРАЦИОННОЕ ОСНОВАНИЕ
Уменьшает уровень шума и вибрации



Вибростенд PLSS оснащен двумя мощными электродвигателями, смещенными друг относительно друга и передающими правильную частоту вибраций и оптимальное движение образцам. В конце цикла электродвигатели тормозятся, чтобы избежать перегрузки. Уникальный дизайн встряхивателя PLSS гарантирует быстрые, точные и воспроизводимые испытания. Оригинальные технические решения обеспечивают низкий уровень шума при работе шейкера, а усиленная конструкция позволяет использование вибростенда PLSS в самых различных рабочих условиях.

Вибростенд PLSS вмещает до пяти сит плюс крышка и приемный поддон, опорная плита обеспечивает установку сит различного диаметра.

PLSS оснащен съемным блоком управления, а удлинительный провод дает возможность управления вибростендом с любого места, удобного для монтажа блока управления. Для безопасности оператора вибростенд PLSS оснащен системой блокировки вибростенда во время установки или снятия сит.

Для работ с небольшими загрузками можно использовать сита, специально предназначенные для работы с вибростендом PLSS. Эти уникальные сита снабжены загрузочной воронкой и выпускным патрубком для образца. Аппарат вмещает до 5 сит, диаметром 450мм. Выпускные патрубки снабжены скобами для прикрепления мешков, трубок или лотков.

Характеристики

Высота без учета штанг: 385мм

Ширина: 580мм

Глубина: 580мм

Вес нетто: 91.5кг

Напряжение питания: 230В/50Гц

Возможно размещение сит диаметром: 350, 400, 450мм и 18 дюймов

По вопросам приобретения оборудования или получения дополнительной информации обращайтесь в офис нашей компании

191123, Россия, г.Санкт-Петербург, Шпалерная улица, дом 33

Телефон/Факс: (812) 438-1038; 438-1110

E-mail: info@nexlab.ru Internet: www.nexlab.ru